


Bedienungsanleitung

AL-20S




Aqua Lupo das Hundewasserlaufband für den Heimgebrauch



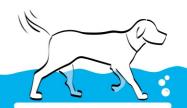

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Verwendung	3
Lieferumfang/Geräteteile	
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewaren	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Restrisiken	6
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrogeräte.	6
Erstverwendung	7
Bedienung	8
Betrieb	9
Reinigung und Wartung10-1	
Reparatur 1	2
Lagerung 1	2
	2
Fehlersuche 1	3
	4
Entsorgung 1	5
	6

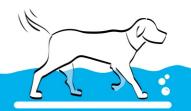

Verwendung




Das AL-20S ist nur für Trainingszwecke bei gesunden Tieren gedacht.




Bei einer Therapieanwendung (Reabilitierung) sollte immer ein Physiotherapeuth oder Tierarzt anwesend sein!



Eine Fremdverwendung kann zu Schäden am Gerät führen.

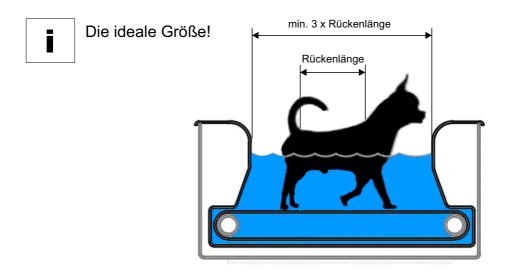

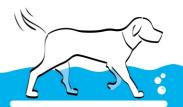

Lieferumfang/Geräteteile



- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Kurzbeschreibung



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

oder zu Beschädigungen des Hundewasserlaufbandes führen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Hundewasserlaufband AL-20S (im folgenden nur "AL-20S" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das AL-20S verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das AL-20S an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem AL-20S oder auf der Verpackung verwendet.



Bezeichnet eine gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.




Warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung hin.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

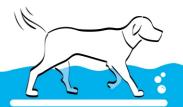

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Wasserlaufband ist bestimmt für das Training von Hunden und Katzen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung bei Verletzungen, Verlust oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Trockenlauf; (min. 5L Wasserbedarf beim AL-20S)
- Fester Standort; Vergewissern Sie sich, dass das Becken stabil und gerade steht, bevor Sie es befüllen.
- Verwendung des AL-20S für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für das AL-20S bestimmt sind;
- Veränderungen an dem AL-20S;
- Reparatur des AL-20S durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft;
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des AL-20S
- Bedienung oder Wartung des AL-20S durch Personen, die mit dem Umgang mit dem AL-20S nicht vertraut sind und/oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

Restrisiken

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht offensichtliche Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden.

Bedingt durch die Art des AL-20S können folgende Gefährdungen auftreten:

- Bei Einwerfen von Fremdkörpern kann ein Einklemmen zwischen Laufband und Beckenwand passieren;



Erstverwendung

Das AL-20S und den Lieferumfang prüfen

- a. Nehmen Sie das AL-20S aus der Verpackung
- b. Kontrollieren Sie, ob das Al-20S oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Al-20S nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- c. Prüfen Sie ob, die Lieferung vollständig ist (siehe Seite 4)
- d. Schließen Sie das AL-20S wie folgt an:



1. Schrauben Sie den Schnellanschluss für den Wasserablauf mit der Hand fest ein.




 Schließen Sie das Netzteil an den Strom an und vergewissern Sie sich, dass der Stecker trocken ist und fest sitzt.



- 2. Stecken Sie den Schlauchanschluss ein bis er verriegelt.
- 3. Schließen Sie den Wasserablaufhahn.



 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Beckenanschluss am AL-20S und vergewissern Sie sich, dass der Stecker einrastet.

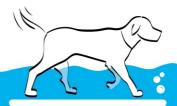

Bedienung


 Befüllen Sie das Al-20S, je nach Trainingszweck, in der gewünschten Wasserhöhe.

HINWEIS!

- Achten Sie darauf, die Befüllhöhe nicht zu unter- oder überschreiten.
- Kein Trockenlauf. (min. 5 lit Wasserbedarf)
- Die Wassertemperatur kann, je nach Anwendungszweck, zwischen 4°C und 34°C variieren.

HINWEIS!

- Geben Sie auf **keine**n Fall **Seife** oder andere nicht geeignete Reinigungsmittel ins Wasser!

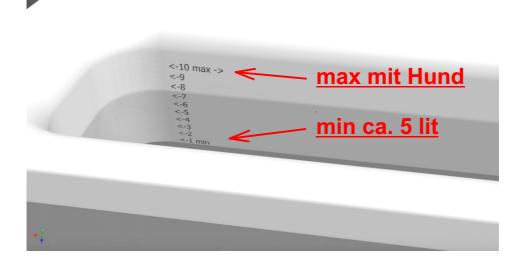



Betrieb

Sprechen Sie vor dem ersten Training mit Ihrem Tierarzt oder Tierphysiotherapeuten.



<u>Lassen Sie Ihren Hund während</u> <u>der Anwendung niemals</u> <u>unbeaufsichtigt !</u>



Der Hund muss sauber sein.

Dies ist keine Reinigungsstation! Verunreinigungen beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes und können zu Beschädigungen führen.



Dies ist kein Schwimmbecken!

Gewöhnen Sie Ihren Hund langsam daran gegen den Wasserwiderstand zu gehen.

Weitere Trainingsempfehlungen, Zubehör und mehr Informationen bekommen Sie auch auf unserer Homepage:

www.aqua-lupo.de

Eine maximale Trainingseinheit beträgt 20 Minuten. Nach 20 min. schaltet sich das Gerät automatisch ab.



Reinigung und Wartung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung des AL-20S kann leichte Verletzungen verursachen.



Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.


- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Achten Sie darauf, dass das externe Netzteil (Abb. 4) niemals mit Wasser in Kontakt kommt. Bei einem Kontakt mit dem Netzteil und Wasser darf dieses niemals ohne Trocknung verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckerbuchse (Abb. 5) niemals mit Wasser in Kontakt kommt.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie könnten die Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel zum Reinigen von Kunststoffteilen.

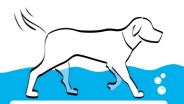



Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Reinigung!

- Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchende in einem Abfluss liegt und der Ablaufhahn geschlossen ist.
- Füllen Sie 20ml AL-Bacterial-Cleaner und min. 5l Wasser ins Becken und lassen Sie das Band nochmals 2-3 min laufen.
- Schalten Sie das AL-20S ab und öffnen Sie den Ablaufhahn (Abb. 4)
- Entfernen Sie das Netzteil, bevor Sie weitere Arbeiten an dem AL-20S durchführen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch oder Lappen.
- Reinigen Sie das Laufband mit einer weichen Bürste.
- Nachdem das Wasser abgelaufen ist, heben Sie das Becken auf der linken Seite leicht an und lassen Sie das restliche Wasser komplett ablaufen.

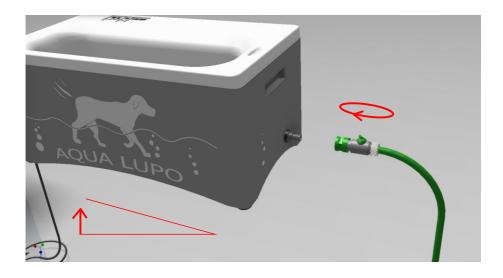


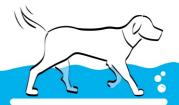

Reparatur


Im Inneren des AL-20S befinden sich keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Falls Sie eine Beschädigung feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Hersteller. Eigenständige Reparaturen und Öffnen des Gehäuses führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Wenn das Netzkabel des Netzteils beschädigt wird, muss dieses durch ein neues Netzteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Händler/Kundendienst erhältlich ist.

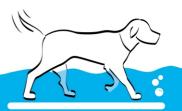


Lagerung

- Reinigen Sie das AL-20S, bevor Sie es lagern (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung")
- Lagern Sie das AL-20S und Zubehör an einem trockenen, frostfreien Ort. Die ideale Lagertemperatur beträgt 10 bis 30°C.
- Bewahren Sie das AL-20S immer außerhalb der Rechweite von Kleinkindern auf.
- Lagern Sie nichts in oder auf dem AL-20S (nicht stapelbar).
- Überprüfen Sie das AL-20S auf mögliche Schäden, bevor Sie es erneut verwenden.

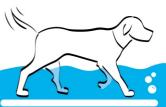


Transport

- Unsachgemäßer Transport kann zu Beschädigungen führen.
- Entfernen Sie vor dem Transport das Netzteil und den Schlauch mit Hahn.
- Tragen Sie das AL-20S immer an den Tragegriffen
- Das Netzteil sollte nie lose in dem AL-20S liegen, da dieses beim Transport zu Beschädigungen des Innenbeckens führt.
- Wir empfehlen, zum Transport immer die Originalverpackung zu verwenden.

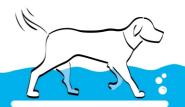


Fehlersuche

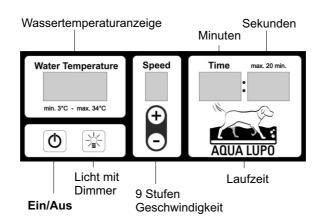

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Wasser- Temperatur- Anzeige BLINKT! [Water T.]	- Die Wassertemperatur ist zu kalt oder zu warm. Sie muss zwischen 3° - 34°C liegen.	Die Wassertemperatur anpassen.
Geschwindig- keitsanzeige BLINKT! [Speed]	- Eine Verklemmen am oder im Laufband Ein zu schwerer Hund Ein Trockenlauf oder stake Verunreinigung im Inneren des AL-20S.	Kontrollieren Sie ob Gegenstände hineingefallen sind und entfernen Sie diese ggf. Service Tel. 0800-05151
Laufzeit- anzeige BLINKT! [Time]	*Die maximale Tages- Laufzeit ist abgelaufen.	Das Gerät aus- und wieder einschalten. Die Übung kann nach 2-3 Tagen wiederholt werden.

^{*}Eine maximale Trainingseinheit pro Hund beträgt 20 Minuten am Tag und sollte nicht überschritten werden.

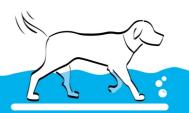

Technische Daten

Al-20S (Wasserlaufband):

Artikelnummer: SW10020.1 Modell: AL-20S Spannung: 12V Umdrehung max.: 60 U/min Gewicht: 9,80 kg

Außenmaße in mm L/B/H660/370/470Becken Innenabmessung in mm L/B/H500/160/170

Wasserbedarf: min. 5 l / max. 15 l

Größe vom Tier:

Gewicht: 1,0 - 2,9kg Rückenlänge: ca. 15-25cm Brustumfang: ca. 40-55cm

Netzteil:

Artikelnummer: SW10017

Modell: XY1205000UBO

Versorgungsspannung: 100-220 V, 50/60Hz, 1,5A max.

Nennspannung: 12V, 5,0A


Schutzklasse: IP67

Wasserhahn:

Schlauchanschluss: 3/4" zoll Schnellanschluss: 12mm

Schlauch:

Durchmesser: 3/4" zoll Länge: 1,5m

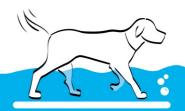

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie die Pappe und Karton zum Altpapier, Folien und Styropor in die Wertstoffsammlung.

Al-20S entsorgen

 Entsorgen Sie das AL-20S entsprechend den in ihrem Land geltenden Vorschriften



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dieses kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

EG-Konformitätserklärung



D-63322 Rödermark

Germany



Typ: AL-20S

Produkt: Hundewasserlaufband

Produktbild:



den folgenden Richtlinien entspricht:

- 2006/95/EC Niedervolt Richtlinie

- 2004/108/EC
 - 2011/65/EC
 - 2009/125/EC
 EMC Richtlinie
 RoHS Richtlinie
 ErP Richtlinie

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen Herangezogen:

EN 60335-1 + EN 62233 + EN 61558-1 + EN 61558-2-16 EN 55014-3-2 + EN 61000-3-2 + EN 6100-3-3 + EN 55014-2

Basiert auf Prüfnachweis von Testlobors:

- TUV SUED

- SGS

- Intertek

Roedermark den: 04.Oktober.2018

Dirk Thiele